



Meso Biostim tx

Multifunzione **3 in 1**

ELETTROPORATORE • FOTOBIOSTIMOLAZIONE LED • ULTRASUONI



Serietx[®]

i plus hi-tech
dell'intelligenza
artificiale GMS

smart • interconnessa • digitale

Meso Biostim tx

multifunzione 3 in 1

ELETTROPORAZIONE • FOTOBIOSTIMOLAZIONE • ULTRASUONI

3 differenti modalità operative che interagiscono o si applicano separatamente, con sistemi differenziati.

ELETTROPORAZIONE

Che cos'è la veicolazione transdermica attiva

Grazie ad innovative micro-correnti ed esclusive forme d'onda progettate nei laboratori GMS, siamo in grado di creare dei canali "temporanei" sulla membrana cellulare e renderla permeabile. Questo permette di veicolare fino al derma principi attivi (molecole idrosolubili), per garantire la massima efficacia del trattamento in modo non invasivo, indolore e sicuro.



FOTOBIOSTIMOLAZIONE

Il potere della luce

È una terapia basata sulla comunicazione ed interazione tra energia luminosa e tessuti. Differenti diodi led con diverse lunghezze d'onda, determinano effetti biologici per un rapido ripristino dell'integrità dei tessuti, grazie ad un aumento o un decremento dell'attività cellulare.

LUCE GIALLA:
lenitiva, decongestionante.

LUCE ROSSA:
anti-aging, rigenerante, elasticizzante.

LUCE VIOLA:
stimolante del flusso sanguigno, riduzione pori, opacizzante.

LUCE VERDE:
iluminante, schiarente.

LUCE BLU:
sebo-riequilibrante, anti-acne.



ULTRASUONI

Il manipolo U-Skin con doppia funzione


Dispositivo ad ultrasuoni che eroga vibrazioni ed onde a bassa frequenza, svolgendo due differenti funzioni:

- **Skin scrubber:** pulizia del viso accurata e profonda
- **Revital:** micromassaggio rivitalizzante per migliorare la circolazione sanguigna ed il ricompattamento dei tessuti.



La tecnologia **ad alte prestazioni**
per **contrastare IN MODO RIGENERATIVO**
gli inestetismi di viso e corpo

PLUS

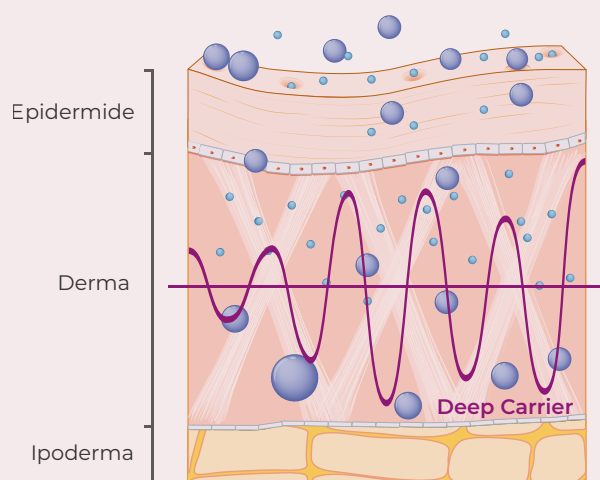

FORME D'ONDA GMS:
Esperienza. Dal 1975

Pionieri di un segmento che racconta un'esperienza pluridecennale in ambito medico. Da sempre studiamo specifiche forme d'onda con l'obiettivo di contrastare in modo selettivo i vari inestetismi ed ottenere la massima efficacia.

DIFFERENTI FORME D'ONDA
in azione e l'esclusiva Deep Carrier®

Meso Biostim è dotato di forme d'onda differenti che agiscono in diverse modalità in base al tipo di inestetismo da trattare e alla profondità della pelle da raggiungere.



Il **Deep Carrier®** è il fiore all'occhiello che in assoluto conferisce a Meso Biostim tx un prestigio differente dalla solita tecnologia di veicolazione.

Parliamo di un'esclusiva forma d'onda creata ad hoc da GMS che attraverso la sua particolare struttura, è in grado di veicolare in profondità anche principi attivi con altissimo peso molecolare.

Serie t^x

Tutti i plus hi-tech GMS che
semplificano il tuo lavoro in cabina

SMART • INTERCONNESSA • DIGITALE

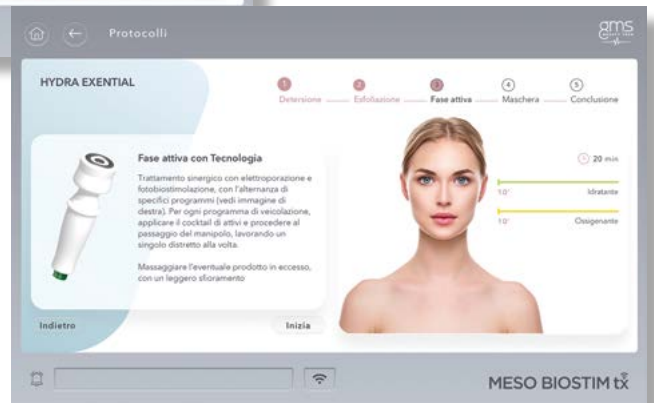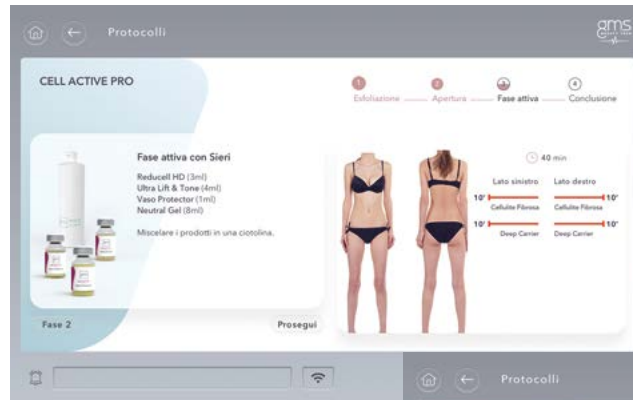

PMS

Protocol-Assisted Management System:

evoluto sistema hi-tech di protocollo trattamento assistito con cosmetica integrata.

Guida l'operatore step by step durante tutte le fasi del trattamento: dalla deterzione, agli attivi da veicolare.



APS

(Automated Program Sequence) protocolli con l'interazione di diversi programmi di elettroporazione e fotobiostimolazione.

Il nuovissimo sistema dinamico e sequenziato che durante il trattamento combina differenti programmi di veicolazione in associazione a diverse lunghezze d'onda di fotobiostimolazione.

19 programmi differenti
per trattamenti viso e corpo

oltre 50 protocolli assistiti
con cosmetica integrata professional & home care,
PER RISULTATI CERTIFICATI GMS.



Connessione wi-fi e area news

tutte le nostre tecnologie serie tx sono dotate di connessione wi-fi per consentirti in modo pratico e veloce per:

- ricevere ed aggiornare la tecnologia;
- installare con un click nuovi programmi;
- ricevere tutte le novità ed offerte Gms



Interfaccia e software intuitivo

Un display touch screen da 10,1 pollici come strumento di interazione pratico e veloce. Interfaccia avanzata ed usabilità estremamente intuitiva per facilitare l'operatore nell'impostazione e la gestione del trattamento.



Rubrica e Gestione cliente

Un innovativo sistema integrato di rubrica del cliente, consente all'operatore di memorizzare e monitorare a portata di click:

- numero sedute, data e tipo di trattamento effettuato / da fare.



La Sinergia che fa la differenza

GMS COSMETICS: per esaltare i risultati dei trattamenti



Il metodo GMS si distingue per la sinergia tra cosmetici e tecnologie in grado di donare: autentiche esperienze di bellezza dai risultati certificati.

Ogni nostro progetto è caratterizzato da un Beauty Program che indica e guida l'operatore in tutte le fasi di trattamento professional e home care con l'utilizzo di specifici cosmetici.

Reviva BEAUTY PROGRAM

Risultati che non hanno bisogno di parole

Con la scelta di Meso Biostim tx, potrai raggiungere la massima espressione di efficacia grazie al lavoro sinergico tra:

PeelPRO
PEELING



SerumPRO
SIERI MESOPORABILI



Meso Biostim tx
TECNOLOGIA



Profondità d'azione:
strato corneo

penetrazione principi attivi:
fino al 10%



Profondità d'azione:
epidermide

penetrazione principi attivi:
fino al 20%



Profondità d'azione:
derma

penetrazione principi attivi:
fino al 90%

Il valore assoluto della Strategia GMS

FORMAZIONE • BEAUTY DAY • PUBBLICITÀ

Impreziosiamo la tua scelta con una serie di asset esclusivi per essere al top rispetto alla concorrenza



Certifichiamo la tua professionalità

All'interno delle Beauty Lab, acquisirai tutte le nozioni tecniche per effettuare il trattamento in modo idoneo e professionale. Inoltre, potrai arricchire in modo ulteriore le tue conoscenze con il percorso Master Class



Event: Beauty Day

Giornata a porte aperte nel tuo istituto ALL-INCLUSIVE. Insieme a te pianificheremo l'organizzazione dell'evento: una Beauty Specialist GMS presenterà i nuovi trattamenti con Meso Biostim tx proponendo promozioni irrinunciabili per i tuoi clienti. L'incasso sarà totalmente tuo per un immediato ritorno economico. Incluso il servizio mobile shop: cosmetici in conto vendita senza nessun costo aggiuntivo.

ASSET PUBBLICITARI

Strumenti visivi:

Arrediamo il tuo istituto con una serie di proposte visive in grado di catturare l'attenzione in vetrina e all'interno dell'istituto


Poster • Totem • Pieghevole con expo da banco



Digital Marketing 4.0

Per te una strategia social inclusa per il lancio pubblicitario di Meso Biostim con:

- **WhatsApp marketing:**
3 post grafici e call to action
- **Social Strategy:**
9 post con testo di valore

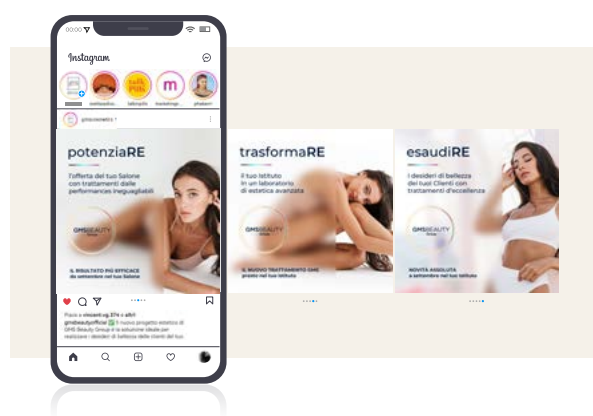

DATI TECNICI:

Alimentazione:	220~230 Vac – 50/60 Hz
Interfaccia utente (HUI):	display 10.1" con touch screen
Frequenza di lavoro:	da 600 a 2024 Hz
Massima tensione:	8,5 V @ 500 ohm
Classe protezione pericoli elettrici:	I
Parte applicata tipo:	BF
Assorbimento:	46 W
Fusibili:	3,15 AT
Dimensioni	L: 400 x H: 230; P: 480 mm
Peso:	10 Kg

Il Laboratorio di bellezza rigenerativa viso e corpo

GMSBEAUTY
Group

Via Acquadolci, 18/20 - 00133 Roma
Tel. 06 7201007 - info@gmsbeauty.com
gmsbeauty.com

