



POLARIS

Radiofrequenza multipolare programmabile

MONOPOLARE • BIPOLARE • QUADRIPOLORE

made in Italy with love



Plus hi-tech Serie tX[®]

smart • interconnessa • digitale

POLARIS

Radiofrequenza multipolare programmabile

MONOPOLARE • BIPOLARE • QUADRIPOLORE

Effetto lifting, anti-aging e tonificante non chirurgico per una bellezza ferma nel tempo.



I **BENEFICI** e l'**efficacia** di **Polaris** già dal **primo trattamento**


Radiofrequenza GMS: come e dove agisce

Il trattamento di radiofrequenza in estetica è il metodo più efficace per contrastare gli inestetismi più diffusi legati al tempo che passa.

La radiofrequenza, attraverso l'utilizzo di onde elettromagnetiche, sfrutta il principio della diatermia che attraverso la diffusione del calore nei tessuti a varie profondità svolge specifiche azioni:


- nell'**epidermide**: favorisce notevole incremento del turn over cellulare;
- nel **derma**: stimola i fibroblasti per la sintesi di nuovo collagene ed elastina;
- nell'**ipoderma**: riduce la stasi microcircolatoria e l'accumulo di liquidi, con riduzione del pannicolo adiposo

L'innovativa azione multipolare di Polaris consente di eliminare le rughe e tonificare la pelle di viso e corpo donando un aspetto più giovane in modo naturale.

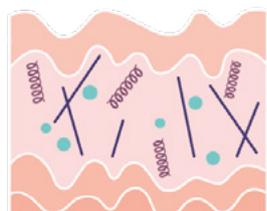


PRIMA

Rilassamento cutaneo, senza trattamenti estetici. Il tessuto si presenta disorganizzato e senza tono.

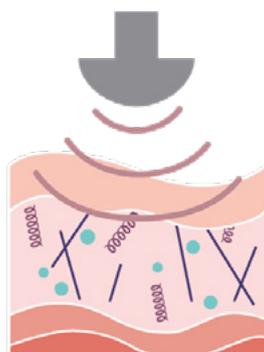

DURANTE

Riattivazione dei fibroblasti attraverso la diffusione del calore. I vari strati di tessuto iniziano sin da subito a distendersi.

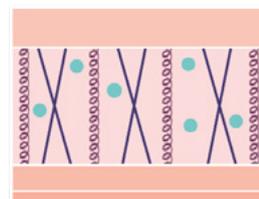

DOPO

Nuova produzione di collagene ed elastina. La pelle risulterà più liscia, tonica e compatta.

Segni distintivi



Totale comfort con Soft-Power System

Grazie a questo sistema, il calore viene diffuso gradualmente e solo nel momento in cui il manipolo entra in contatto con la pelle, per garantire trattamenti sicuri e confortevoli.



38 programmi di trattamento certificati

Ben 38 programmi pre-impostati, 9 per il viso e 29 per il corpo, testati e certificati da un team di beauty specialist Gms. Tutti i parametri di default, potranno essere personalizzati con la sezione expert.



Radiofrequenza multipolare 3 in 1

Caratterizzata da un triplo sistema di erogazione dell'energia: Monopolare, Bipolare e Quadripolare, per offrire infinite soluzioni di trattamento su misura.



100% di efficacia con Dynamic-Power

Individua le impedenze del tessuto autoregolandosi in tempo reale per un'erogazione sempre omogenea. Questo plus hi-tech, garantisce risultati efficaci ed uniformi.



Modalità expert per trattamenti su misura

Tutti i parametri dei programmi pre-impostati potranno essere personalizzati in base alle esigenze del cliente, consentendo di ideare soluzioni su misura e garantire sempre il miglior risultato.

Plus: 6 manipoli ergonomici



6 manipoli viso e corpo

- **RF Monopolare:** 1 manipolo intercambiabile con 3 elettrodi di diverse dimensioni.
- **RF Bipolare:** 1 manipolo viso specifico per contorno occhi e labbra.
- **RF Quadripolare:** 2 manipoli, uno per il viso ed uno per il corpo.

Design ergonomico

Per l'operatore:

manipoli leggeri e dall'impugnatura ergonomica per garantire il massimo comfort durante l'esecuzione del trattamento. Un led luminoso all'interno indicherà il corretto funzionamento.


Per il cliente:

la forma anatomica (testine ed elettrodi) unitamente alla sensazione di calore e al massaggio ottenuto dalle manovre, renderà il trattamento molto piacevole e rilassante.

Capacitiva · Resistiva

Monopolare, Bipolare e Quadripolare

Perchè e come agiscono

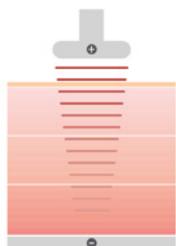


CAPACITIVA MONOPOLARE CORPO

Consente di focalizzare il raggio d'azione, in un punto specifico e trasferire il calore in profondità fino all'ipoderma.

Azioni principali

Sul corpo: profonda azione snellente e rimodellante

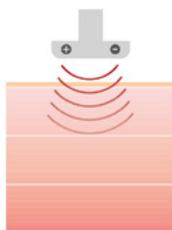


RESISTIVA BIPOLARE VISO E CORPO

L'emissione delle onde avviene in maniera ravvicinata per un'azione specifica su rughe e segni di espressione.

Azioni principali

Sul viso: strepitoso effetto lifting contorno occhi e labbra.

Sul corpo: azione tonificante ed elasticizzante.

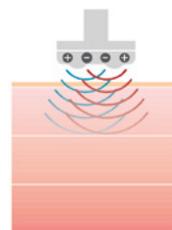

RESISTIVA QUADRIPOLO VISO E CORPO

L'emissione delle onde avviene in modo diffuso e multidirezionale, per un'azione profonda e omogenea.

Azioni principali

Sul viso: azione anti-age, elasticizzante e rimpolpante

Sul corpo: profonda azione tonificante e rimodellante



Risultati reali e certificati

Ringiovanisce il viso e tonifica il corpo in modo naturale

Benefici e azioni principali

Viso

- Leviga rughe e segni d'espressione;
- Ringiovanisce e ridisegna l'ovale del viso;
- Stimola la produzione di collagene ed elastina;
- Pelle più luminosa, giovane e ossigenata.

Corpo

- Tonifica e rassoda per un aspetto più giovane e compatto;
- Migliora l'elasticità della pelle;
- Ridefinisce i contorni della silhouette;
- Assottiglia l'aspetto delle smagliature;
- Contrasta il pannicolo adiposo e riduce l'aspetto a buccia d'arancia.

Serie tx

Tutti i plus hi-tech GMS che
semplificano il tuo lavoro in cabina

SMART • INTERCONNESSA • DIGITALE



Connessione wi-fi e area news


tutte le nostre tecnologie serie tx sono dotate di connessione wi-fi per consentirti in modo pratico e veloce di:

- ricevere aggiornamenti software e assistenza da remoto;
- installare con un click nuovi programmi;
- ricevere tutte le novità ed offerte GMS.



Interfaccia e software intuitivo

Un display touch screen da 10,1 pollici come strumento di interazione pratico e veloce. Interfaccia avanzata ed usabilità estremamente intuitiva per facilitare l'operatore nell'impostazione e la gestione del trattamento.

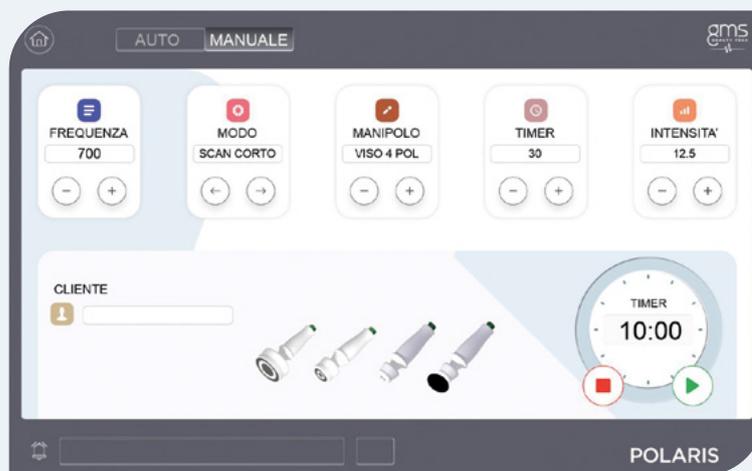

Scheda e Gestione cliente

Un innovativo sistema integrato di gestione dati consente all'operatore di memorizzare e monitorare a portata di click:

- anagrafica cliente;
- numero sedute, data e tipo di trattamento effettuato / da fare.

Il valore assoluto della Strategia GMS

COSMETICI • FORMAZIONE • BEAUTY DAY • PUBBLICITÀ

Impreziosiamo la tua scelta con una serie di asset esclusivi
per essere al top rispetto alla concorrenza

GMS Cosmetics

Per esaltare i risultati dei trattamenti

Il metodo GMS si distingue per la sinergia tra cosmetici e tecnologie in grado di donare: autentiche esperienze di bellezza dai risultati certificati.

Ogni nostro progetto è caratterizzato da un Beauty Program che indica e guida l'operatore in tutte le fasi di trattamento professional e home care con l'utilizzo di specifici cosmetici.



Formazione

Certifichiamo
la tua professionalità

All'interno delle Beauty Lab, **acquisirai tutte le nozioni** tecniche per effettuare il **trattamento** in modo **idoneo e professionale**. Inoltre, potrai arricchire in modo ulteriore le tue conoscenze con il percorso Master Class.

Beauty Day

Giornata a porte aperte nel tuo Istituto **all-inclusive**

Insieme a te, una **Beauty Specialist GMS** presenterà i **nuovi trattamenti** con delle promozioni irrinunciabili per i tuoi clienti. L'incasso sarà totalmente tuo per un **ritorno economico immediato**. Incluso il servizio **mobile shop**: cosmetici in conto vendita senza nessun costo aggiuntivo.



Asset Pubblicitari

Per comunicare meglio e vendere di più

Arrediamo il tuo istituto con una serie di proposte visive in grado di catturare l'attenzione in vetrina e all'interno dell'istituto:

- Poster;
- Totem;
- Pieghevole con expo da banco.

Digital Marketing 4.0

Per te una strategia social inclusa per il lancio pubblicitario di Polaris con:

- Piano editoriale con post grafici e testi di valore completi di call to action



DATI TECNICI:

Trasmissione energia	Resistiva e capacitiva
Frequenza	Da 400 kHz a 1200 kHz
Potenza di uscita	25 W resistiva - 50 W capacitiva
Modalità	Automatico/manuale
Programmi preimpostati	38
Impedenza	Riconoscimento automatico
Gestione intensità	Sistema Soft Power
Interfaccia utente	Display LCD 10,1" con touch screen
Connettività	Wi-Fi
Alimentazione	230 VAC - 50/60 Hz
Classe e tipo	I BF
Assorbimento massimo	108 W
Accessorio inclusi	Gambali 8 settori con fascia addominale e marsupio
Accessorio opzionale	kit 6 settori per le braccia
Dimensioni	400 x 450 x 240 (L x P x H)
Peso	7,8 Kg

Esalta la bellezza
con i **trattamenti hi-tech**
più innovativi

GMSBEAUTY
Group

uffici, show room e laboratori
Via Acquadolci, 18/20 - 00133 Roma
Tel. 06 7201007 - info@gmsbeauty.com

gmsbeauty.com

